



Serie 14574 fra hmi-basen.dk

R82 Panther

Funktionel komfortkørestol

 **etac**®

Panther

Funktionel komfortkørestol



Mange indstillingsmuligheder

Gode køreegenskaber

God siddekomfort

Crashtestet

Let og praktisk at tage med

Panther

Panther er en stærk og funktionel komfortkørestol til børn. Panther giver, med sit meget store tilbehørsprogram, mulighed for at imødekomme individuelle behov, hvad angår siddestilling og komfort. Køreegenskaberne kan tilpasses det enkelte barn, så det har mulighed for at køre stolen selv. Ryggen kan vinkles i forhold til sædet. Åbning eller lukning af hoftevinklen sker i et punkt tæt på barnets hofteled, så eventuelle støttepunkter i ryggen ikke flytte sig når man ændre på ryggens vinkling. Sædeenheden kippes trinløst. Drivhjulene er placeret med en cambervinkel på -6,5° og der er mulighed for at vælge forskellige størrelser og placeringer af hjulene. Panther er en fremragende kørestol og er testet i henhold ISO 7176:19, EN 12182 og EN 12183.

Panther som standard

Stel	Polyesterbelagt stål 37
Kørebjølle	Højde- og vinkeljusterbar
Ryg	Vinkeljusterbar
Sæde	Vinkeljusterbart, sædetilt
Hynder	Flammesikkert koldskum
Betræk	Trevira CS, inkontinensfolie på bagsiden af sædebetræk, vask ved 40°
Rygsæk	Sort
Hjul	Drivhjul: Flexel, med Quick Release, camber-vinkel -6,5°, sorte plast drivringe Forhjul: 140 x 40 mm, massive
Egerbeskytter	Klar plast med Panther dekoration
Bremser	Tromlebremser (TB) og knæledsbremser (KB)
Fodplade	Højde- og vinkeljusterbar, opklappelig, lige bagkant
Tipsikring	2 stk., svingbare, fodbetjente
Plastdele	PP-polypropylen iblandet 30% glas
Værktøjssæt	Værktøjssæt medfølger
Farve	Sort perlemor stelfarve og sort betræk



Bestilling af Panther

Panther kan leveres i stelfarverne sort perlemor, sort, pink eller blå med sort betræk. For at sikre kort leveringstid, har vi valgt Panther med sort perlemor stelfarve og sort betræk som lagervare. Ønskes en af de øvrige farver, må der påregnes længere leveringstid.


Produkt	HMI-nr.	Art. nr.
Str. 1, SB 28 cm, 22", TB	18575	31945021881
Str. 2, SB 32 cm, 22", TB	18576	31946022881
Str. 3, SB 36 cm, 22", TB	18577	31947022881
Str. 4, SB 40 cm, 22", TB	25877	31948022881

Mål og vægt


Klar til brug med hjul		Str. 1	Str. 2	Str. 3	Str. 4
B:	Bredde	59 cm	62 cm	67 cm	70 cm
H:	Højde skubbehåndtag	96 - 110 cm	96 - 110 cm	96 - 110 cm	96 - 110 cm
L:	Længde ved standard sædedybde	84 cm	92 cm	100 cm	120 cm
SB:	Sædebredde	28 cm	32 cm	36 cm	40 cm
SD:	Sædedybde	20 - 29 cm	26 - 35 cm	30 - 39 cm	30 - 39 cm
	Sædedybde + 5 cm	25 - 34 cm	31 - 40 cm	35 - 44 cm	35 - 44 cm
	Sædedybde + 10 cm	30 - 39 cm	36 - 45 cm	40 - 49 cm	40 - 49 cm
SH:	Sædehøjde over gulv *	46 - 52 cm	46 - 52 cm	46 - 52 cm	46 - 52 cm
RH:	Ryghøjde	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm
	Ryghøjde + 5 cm	43 cm	45 cm	47 cm	49 cm
UBL:	Underbenslængde	14 - 35 cm	14 - 35 cm	16 - 40 cm	16 - 40 cm
	Vægt (afhængig af hjultype)	19,5 - 21 kg	21,5 - 23 kg	22 - 23,5 kg	24 - 25,5 kg
	Maks. brugervægt	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg
	Crashtestet til brugervægt	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
	Vinkling af ryg	-2° til 35°	-2° til 35°	-2° til 35°	-2° til 35°
	Vinkling af sæde	-9° til 35°	-9° til 35°	-9° til 35°	-9° til 35°
	Vinkling af fodstøtte	-28° til 87°	-28° til 87°	-28° til 87°	-28° til 87°
	Cambervinkel	-6,5°	-6,5°	-6,5°	-6,5°

* Målt på vandret sæde (0°) og standard hjulplacering

Sammenklappet uden drivhjul		Str. 1	Str. 2	Str. 3	Str. 4
	Bredde	45 cm	48 cm	51 cm	55 cm
	Højde	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
LUD:	Længde	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
	Vægt	15 kg	17 kg	17,5 kg	19,5 kg

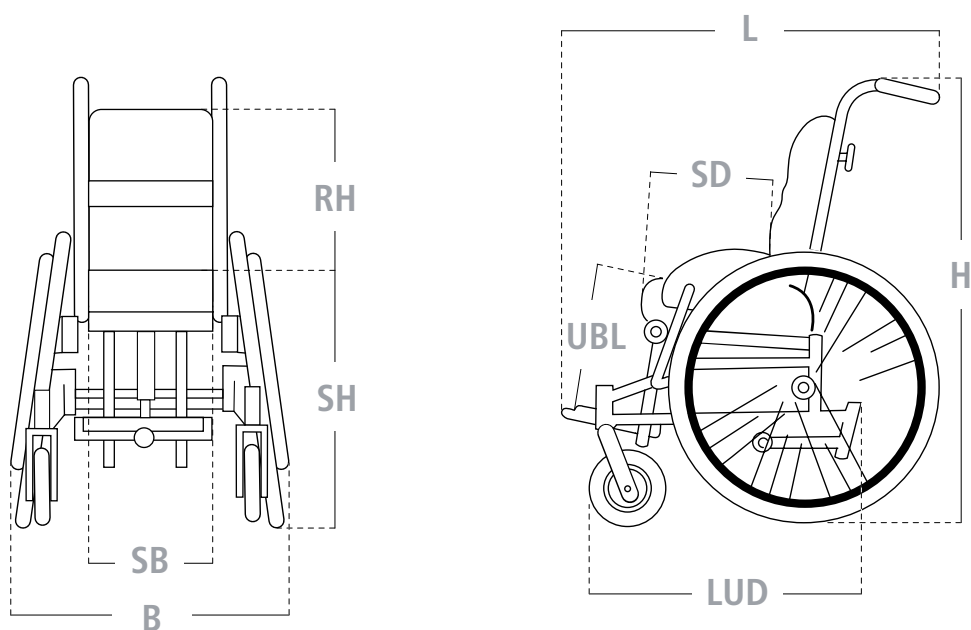


Stelfarver

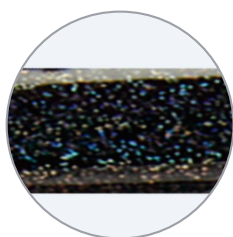

Sort Perlemor - 60
Lagervare



Blå - 51
Bestillingsvare

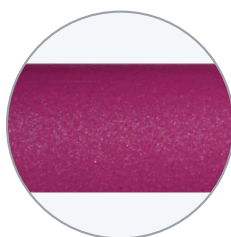

Pink - 50
Bestillingsvare



Sort - 01
Bestillingsvare

Rygvinkling



Tilt af sædeenhed, trinløs



Tilbehør og reservedele



Hovedstøtter

Vi henviser til brochuren
„Tryk og sikker“



Vinkeljusterbare armlæn, sæt (Højde fra sædet: 20 - 26 cm)

	L x B cm	
Str. 1	25 x 8	3194713-1
Str. 2	29 x 8	3194713-2
Str. 3	33 x 8	3194713-3
Str. 4	36 x 8	3194713-4



Højdejusterbar skubbebøjle

Str. 1	3194971
Str. 2	3194972
Str. 3	3194973
Str. 4	3194974



Bord med kant, grå plast

Str. 1 - 4	3189220-01
Ydre mål: B 49 x D 38 cm	
Udskæring: B 25 x D 12 cm	



Rygforlænger med betræk

	H x B cm	
Str. 1	12 x 22	3194055-1
Str. 2	12 x 26	3194055-2
Str. 3	12 x 30	3194055-3
Str. 4	12 x 34	3194055-4



Bord med kant, grå plast (ydre mål B 59 x D 45 cm)

Udskæringens mål i B x D cm	
Str. 1 og 2	40 x 10 3189220-2
Str. 3	45 x 12 3189220-3



Ekstra betræk til rygforlænger

	H x B cm	
Str. 1	12 x 22	3194955-160
Str. 2	12 x 26	3194955-260
Str. 3	12 x 30	3194955-360
Str. 4	12 x 34	3194955-460



Bord med kant, klar plast

Str. 1 - 4	3189230-01
Ydre mål: B 49 x D 38 cm	
Udskæring: B 25 x D 12 cm	



Svingbare sidestøtter

Se separat brochure for yderligere
information.



Bord med kant, klar plast (ydre mål B 59 x D 45 cm)

Udskæringens mål i B x D cm	
Str. 1 og 2	40 x 10 3189230-2
Str. 3	45 x 12 3189230-3



Vinkeljusterbare armlæn, sæt (Højde fra sædet: 14 - 20 cm)

	L x B cm	
Str. 1	24 x 8	3194712-1
Str. 2	28 x 8	3194712-2
Str. 3	32 x 8	3194712-3
Str. 4	36 x 8	3194712-4



Sideplader, sæt (selv pladen er 12,5 cm høj)

	H x L cm	
Str. 1	12,5 - 18 x 15	3194720-1
Str. 2	12,5 - 18 x 28	3194720-2
Str. 3	12,5 - 24 x 33	3194720-3
Str. 4	12,5 - 24 x 33	3194720-3

Tilbehør og reservedele



Kileformede sidehynder med betræk, sæt (dybde 2 cm øverst og 4 cm nederst)

	H x L cm	
Str. 1	10 x 16	3194721-160
Str. 2	10 x 21	3194721-260
Str. 3	10 x 24	3194721-360
Str. 4	10 x 24	3194721-360



Ekstra betræk til kileformede sidehynder, sæt

Str. 1	3194722-160
Str. 2	3194722-260
Str. 3 og 4	3194722-360




Abduktionsklods

	H x B x D cm	
Str. 1	9 x 9 x 9	3194830-1
Str. 2	9 x 9 x 12	3194830-2
Str. 3	9 x 9 x 15	3194830-3
Str. 4	9 x 9 x 18	3194830-4



Adapter, sæt

Skal monteres sammen med fodstøtter og fodstøttestang
One size 3194956

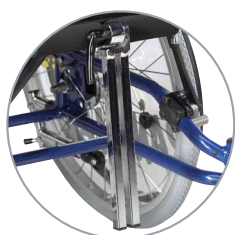

Delt fodstøttestang

Skal monteres sammen med delte fodstøtter og adapter


19 cm	318975285
24 cm	318975286
29 cm	318975287
35 cm	318975288
50 cm	318975289



Delte fodstøtter, sæt

Skal monteres sammen med fodstøttestang og adapter

Str. 1 - 10 x 16 cm	3189146-1
Str. 2 - 12,5 x 18,5 cm	3189146-2
Str. 3 - 13 x 21 cm	3189146-3

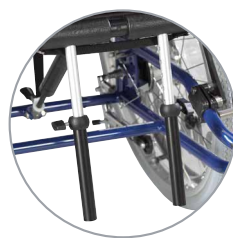

Forlænger til fodstøtter, sæt

One size 3194955



Lægstøtte

	B x H cm	
Str. 1 + 2	27 x 12	3187478-1
Str. 3 + 4	32 x 12	3187478-2



Kombikaleche, blå

One size 3194442-120



Transportbeslag, sæt

One size 3194900-01



Seler

Se separat brochure for yderligere information.



Ankelseler

Se separat brochure for yderligere information.

Tilbehør og reservedele



Kørebøjle

Vinkel- og højdejusterbar

Str. 1	3194981
Str. 2	3194982
Str. 3	3194983
Str. 4	3194984



Polstret ryg i træ

	H x B cm	
Str. 1	32 x 26	3194641-1
Str. 2	34 x 30	3194641-2
Str. 3	37 x 34	3194641-3
Str. 4	37 x 38	3194641-4



Rygsæk

Str. 1 og 2	3194480-1
Str. 3 og 4	3194480-2



Polstret ryg + 5 cm i træ

	H x B cm	
Str. 1	37 x 26	3194644-1
Str. 2	39 x 30	3194644-2
Str. 3	42 x 34	3194644-3
Str. 4	42 x 38	3194644-4



Ryghynde med betræk

	H x B x D cm	
Str. 1	33 x 27 x 5	3194741-160
Str. 2	36 x 32 x 5	3194741-260
Str. 3	38 x 35 x 5	3194741-360
Str. 4	38 x 38 x 5	3194741-460



Sædehynde med betræk

	H x B x D cm	
Str. 1	6 x 27 x 26	3194742-160
Str. 2	6 x 31 x 33	3194742-260
Str. 3	6 x 35 x 35	3194742-360
Str. 4	6 x 39 x 35	3194742-460



Ekstra betræk til ryghynde

Str. 1	3194761-160
Str. 2	3194761-260
Str. 3	3194761-360
Str. 4	3194761-460



Ekstra betræk til sædehynde

Str. 1	3194762-160
Str. 2	3194762-260
Str. 3	3194762-360
Str. 4	3194762-460



Ryghynde + 5 cm med betræk

	H x B x D cm	
Str. 1	38 x 27 x 5	3194744-160
Str. 2	41 x 32 x 5	3194744-260
Str. 3	43 x 35 x 5	3194744-360
Str. 4	43 x 38 x 5	3194744-460



Sædehynde + 5 cm med betræk

	H x B x D cm	
Str. 1	6 x 27 x 31	3194745-160
Str. 2	6 x 31 x 38	3194745-260
Str. 3	6 x 35 x 40	3194745-360
Str. 4	6 x 39 x 40	3194745-460



Ekstra betræk til ryghynde + 5 cm

Str. 1	3194764-160
Str. 2	3194764-260
Str. 3	3194764-360
Str. 4	3194764-460



Ekstra betræk til sædehynde + 5 cm

Str. 1	3194765-160
Str. 2	3194765-260
Str. 3	3194765-360
Str. 4	3194765-460

Tilbehør og reservedele



Sædehynde + 10 cm med betræk

	H x B x D cm	
Str. 1	6 x 27 x 36	3194746-160
Str. 2	6 x 31 x 43	3194746-260
Str. 3	6 x 35 x 45	3194746-360
Str. 4	6 x 39 x 45	3194746-460



Ekstra betræk til sædehynde + 10 cm

Str. 1	3194766-160
Str. 2	3194766-260
Str. 3	3194766-360
Str. 4	3194766-460



Polstret sæde i træ

	B x D cm	
Str. 1	26 x 21	3194642-1
Str. 2	30 x 26	3194642-2
Str. 3	34 x 30	3194642-3
Str. 4	39 x 30	3194642-4



Polstret sæde + 5 cm i træ

	B x D cm	
Str. 1	26 x 26	3194645-1
Str. 2	30 x 31	3194645-2
Str. 3	34 x 35	3194645-3
Str. 4	39 x 35	3194645-4



Polstret sæde + 10 cm i træ

	B x D cm	
Str. 1	26 x 31	3194646-1
Str. 2	30 x 36	3194646-2
Str. 3	34 x 40	3194646-3
Str. 4	39 x 40	3194646-4



Sæderamme til træsæde (xx = farvekode)

	B x D cm	
Str. 1	29 x 21	3194167-xx
Str. 2	33 x 26	3194168-xx
Str. 3	37 x 30	3194169-xx
Str. 4	41 x 30	3194170-xx



Sæderamme til træsæde + 5 cm (xx = farvekode)

	B x D cm	
Str. 1	29 x 26	3194171-xx
Str. 2	33 x 31	3194172-xx
Str. 3	37 x 35	3194173-xx
Str. 4	41 x 35	3194174-xx



Sæderamme til træsæde + 10 cm (xx = farvekode)

	B x D cm	
Str. 1	29 x 31	3194181-xx
Str. 2	33 x 36	3194182-xx
Str. 3	37 x 40	3194183-xx
Str. 4	41 x 40	3194184-xx



Sædeforlænger til fodplade

Str. 1	3194524-1
Str. 2	3194524-2
Str. 3	3194524-3
Str. 4	3194524-4



Fodplade med skrå bagkant (xx = farvekode)

	B x D cm	
Str. 1	26 x 19	3194145-1xx
Str. 2	26 x 19	3194145-1xx
Str. 3	35 x 26	3194145-3xx
Str. 4	35 x 26	3194145-3xx



Fodplade med lige bagkant (xx = farvekode)

	B x D cm	
Str. 1	29 x 16	3194144-1xx
Str. 2	29 x 16	3194144-1xx
Str. 3	35 x 24	3194144-3xx
Str. 4	35 x 24	3194144-3xx



Bremser

Højre	3194939-H
Venstre	3194939-V

Tilbehør og reservedele



Quick Release

Tromlebremse 312983057



Svingbar tipsikring, sæt

One size 3194953



Drivhjul flexel med drivring, uden egerbeskytter, for tromlebremse

20" 313302300
22" 313302310
24" 313302320



Kiler til udligning af camber 0°, sæt

One size 3194186



Egerbeskytter

xx = farvekode:
50: Pink Panther tryk
51: Blå Panther tryk

20" 3194930-xx
22" 3194932-xx
22", TB 3194932-TBxx
24" 3194934-xx



Drivring

20" i sort plast 312997500
22" i sort plast 312998505
24" i sort plast 312999500
Monteringssæt 313000000



Forhjul

Massiv 150 x 30 313007800
Luft 175 x 40 313007910
Massiv 140 x 40 313007735
Massiv 175 x 40 313007875



Forgaffel

Passer til 150 x 30 og 140 x 40
Standard 312965200
Passer til 175 x 40
Standard 312965768



R82 
nothing compares to a smile!

R82 Panther - Version 1 - 2015 - Forbehold for trykfejl og evt. ændringer

Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens, Danmark
Tel 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57
info@etac.dk www.etac.dk

 **etac**®
Skaber muligheder