



# Rabbit

Mobil ståstøtte, som giver brugeren mulighed for selv at bevæge og orientere sig

 etac®



Rabbit størrelse 1 vist med tilbehør og med en cambervinkel på 8°



Rabbit størrelse 2 og 3 vist med tilbehør og med en cambervinkel på 4°

# Rabbit

Rabbit er en mobil ståstøtte, som giver brugeren mulighed for selv at bevæge og orientere sig. Brugeren er samtidig i højde med omgivelserne og får gode aktivitetsmuligheder.

Den nye model Rabbit er bygget op omkring en centerstamme, der kan fremadvinkles trinløst. Alle støtter kan indstilles trinløst i højden. Bryststøtte, hofte støtte og knæstøtte er desuden let justerbare i bredden, hvilket gør det nemt at indstille Rabbit nøjagtigt til brugeren. Det brede tilbehørsprogram kan skabe optimale muligheder for den enkelte bruger.

Rabbit passer til brugere fra ca. 1 år og opefter.

Leveres i 4 størrelser.



*Rabbit vist med diverse tilbehør*

Beskrivelse	Art.nr.	HMI-nr.
Rabbit str. 1, 22" drivhjul - rød	31862122	44866
Rabbit str. 1, 24" drivhjul - rød	31862124	44888
Rabbit str. 1, 26" drivhjul - rød	31862126	44889
Rabbit str. 2, 26" drivhjul - blå	31862226	44890
Rabbit str. 2, 29" drivhjul - blå	31862229	44891
Rabbit str. 2, 32" drivhjul - blå	31862232	44892
Rabbit str. 3, 29" drivhjul - blå	31862329	44894
Rabbit str. 3, 32" drivhjul - blå	31862332	44895
Rabbit str. 4, 32" drivhjul - Sølv	31862432	44896
Rabbit str. 4, 36" drivhjul - Sølv	31862426	44897



*Stelfarve rød  
Rabbit str. 1*





*Stelfarve blå  
Rabbit str. 2+3*



*Stelfarve sølv  
Rabbit str. 4+5*

## Tekniske data

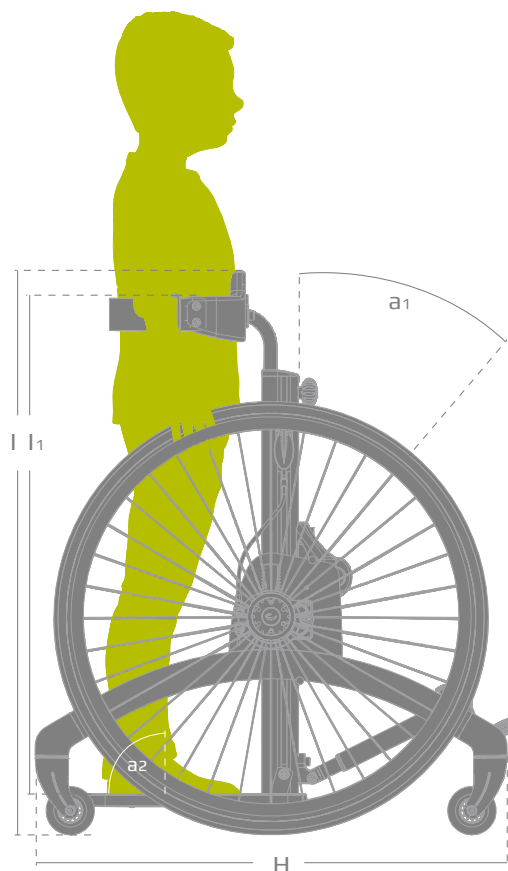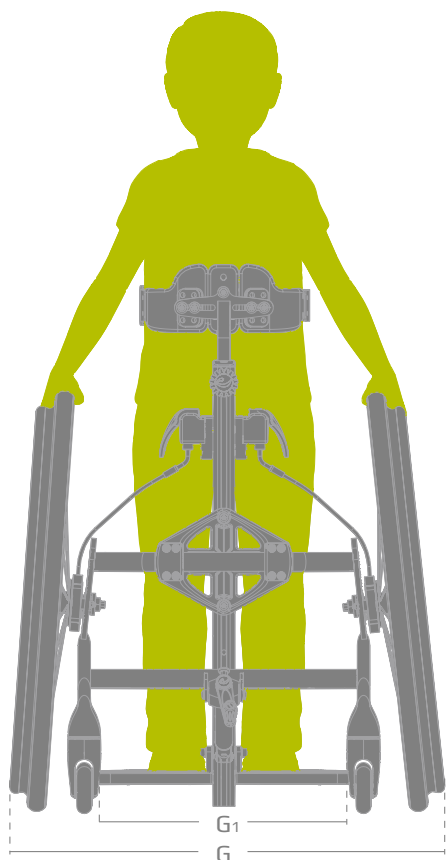

	Str. 1 m/ 22" hjul	Str. 2 m/ 26" hjul	Str. 3 m/ 32" hjul	Str. 4 m/ 36" hjul
H Længde total	62 cm	75 cm	80 cm	90 cm
G Bredde	62 cm	68 cm	69 cm	70 cm
l Total højde	67-100 cm	85-118 cm	99-131 cm	120-153 cm
l <sub>1</sub> Højde fra fodplade	55-74 cm	75-108 cm	83-119 cm	96-142 cm
a <sub>1</sub> Vinkling af centerstamme	0° til +30°	0° til +30°	0° til +30°	0° til +30°
a <sub>2</sub> Vinkling af fodplade	+15° til -10°	+15° til -10°	+15° til -10°	+15° til -10°
Cambervinkel	8°	6°	4°	4°
Vægt	13,5 kg	15,5 kg	16 kg	18,5 kg
Max. brugervægt	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg

Stel:	Aluminiumsrør
Sikkerhedshjul:	Skaterhjul, transparent
Fælg med lukket drivring:	Lakeret aluminium - sort perlemor
Egerbeskytter:	Klar plast
Farver:	Rød, blå og sølv stelfarve (afhængig af størrelsen)




## Detaljer

Rabbit vist med diverse tilbehør



### Vinkling af centerstammen

Centerstammen på Rabbit kan vinkles trinløst, så det er muligt at tilpasse vinklen efter den enkelte brugers muligheder og behov. Selv med en bruger placeret i Rabbit er vinklingsystemet nemt at anvende.

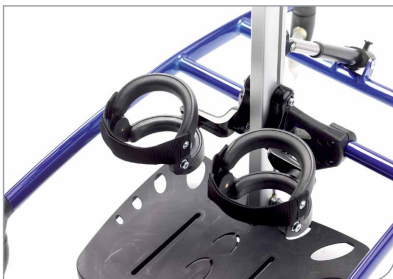


### Knæstøtter

Den todeltede knæstøtte sikrer, at knæet bliver stabiliseret i en anatomisk rigtig stilling. Ledbåndene i knæet bliver således ikke overbelastet og trykket fordeles. Denne løsning er specielt velegnet for dem, der ikke kan få strakt deres knæ helt ud i den oprejste stilling.



### Fodplader

Separate flip-op fodplader med sandalbespænding. Når fodpladerne foldes op, kan brugerens fødder spændes fast, mens han/hun er siddende. Når brugeren bliver rejst op klikker fodpladerne på plads og fødderne er korrekt placeret.

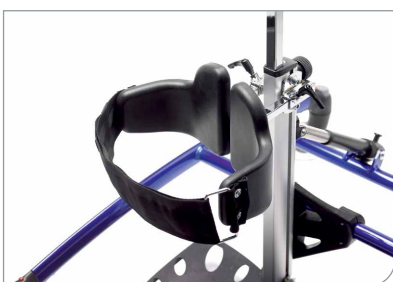

### Hoftestøtte

Rotationshøftestøtten kan roteres og indstilles i dybden. Den er velegnet til brugere, der har problemer med at blive strakt helt ud over hoften. Med rotationshøftestøtten får du et ekstra redskab til at bryde spasticiteten.

## Tilbehør



### Fodplade

Størrelse	Mål B x D cm	Art. nr.
Str. 1	31 x 30	31861211
Str. 2-4	43 x 36	31861212



### Halestøtte

Størrelse	Mål H x B cm	Art. nr.
One size	13 x 19	31861401




### Separate flip-op fodplader med sandalbespænding

Størrelse	Mål B x D cm	Art. nr.
Str. 1	9,5 x 20	31861201
Str. 2+3	11,5 x 24	31861202



### Bryststøtte

Størrelse	Mål H x B x D cm	Art. nr.
Str. 1	11 x 20-27 x 7,5	31861704
Str. 2+3	11 x 20-27 x 7,5	31861702
Str. 4	16 x 25-32 x 10,5	31861703

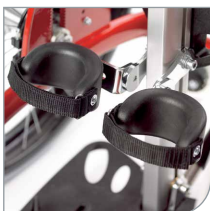

### Knæstøtte

Størrelse	Mål H x B cm	Art. nr.
Str. 1	6 x 6	31861301
Str. 2+3	7 x 8	31861302
Str. 4	7 x 10	31861303



### Bord med legekasse

Størrelse	Mål H x B x D cm	Art. nr.
One size	9 x 31 x 10	31862501
Beslag for bord*		31862510

\* Skal anvendes ved montering af bord



### Todelt knæstøtter

Størrelse	Mål B cm	Art. nr.
Str. 1	7,5	31861311
Str. 2+3	9,5	31861312
Str. 4	11,5	31861313



### Lille plastbord uden balje. Højde og dybdejusterbart

Størrelse	Mål B x D cm	Art. nr.
Str. one size	44 x 34	31862515



### Hofstøtte, front

Størrelse	Mål H x B x D cm	Art. nr.
Str. 1	11 x 15,5 x 7,5	31861601
Str. 2+3	11 x 20-27 x 7,5	31861602
Str. 4	16 x 20-32 x 10,5	31861603



### Hælstop til fodplade

Størrelse	Mål H x B cm	Art. nr.
Lille	4 x 10	31861251
Stor	4 x 14,5	31861252



### Hofstøtte, bag

Størrelse	Mål H x B x D cm	Art. nr.
Str. 1	11 x 15,5 x 7,5	31861501
Str. 2+3	11 x 20-27 x 7,5	31861502
Str. 4	16 x 25-32 x 10,5	31861503



### Andefødder

Størrelse	Mål B x D cm	Art. nr.
Str. 0	17,5 cm	3186149
Str. 1+2	10 x 21,5	3186147
Str. 3	11 x 24	3186148



### Hofstøtte, rotations


Størrelse	Mål H x B x D cm	Art. nr.
Str. 1	11 x 15,5 x 7,5	31861611
Str. 2+3	11 x 20-27 x 7,5	31861612
Str. 4	16 x 25-32 x 10,5	31861613



### Mellemstykke til brystplade

Størrelse	Mål H x B cm	Art. nr.
Str. 2-4	11 x 5,5	31861421
Str. 2-4	16 x 5,5	31861422

## Tilbehør

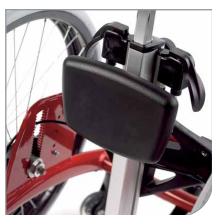


### Maveplade

Størrelse	Mål H x B cm	Art. nr.
One size	13 x 19	31861411



### Drivhjul med egerbeskyttere

Størrelse	Art. nr.
22"	31862822
24"	31862824
26"	31862826
29"	31862829
32"	31862832
36"	31862836

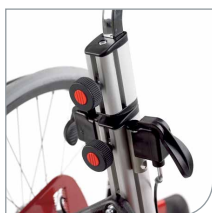

### Forlænger til centerstammen

Størrelse	Mål H cm	Art. nr.
One size	8	31861480



### Stangsystem for hovedstøtte

Størrelse	Mål L cm	Art. nr.
Str. 1+2	45 - 70	31861424-1
Str. 3+4	57 - 88	31861424-2

Bestil pudedel til hovedstøtte samt halestøtte eller hoftestøtte bag separat



### Egerbeskytter

Størrelse	Art. nr.
22"	31862622
24"	31862624
26"	31862626
29"	31862629
32"	31862632
36"	31862636





# Rabbit

- ✓ Giver maksimal mobilitet
- ✓ Stor fleksibilitet
- ✓ Enkelt design
- ✓ Lukkede drivringe
- ✓ Bredt tilbehørsprogram
- ✓ Vinkeljusterbar centerstamme
- ✓ "Quick release"



R82®

*Rabbit vist med  
diverse tilbehør*