



Star Sentinel

powered by Kalogon

Muliggjør hver dag!

Star Sentinel, powered by Kalogon


Sentinel' er et engelsk ord som betyr - En vakt som holder kontinuerlig oppsyn og varsler om eventuelle problemer. Med Sentinel som din personlige vakt, kan du med trygghet utføre hverdagslige aktiviteter.



Brukervennlig og smart teknologi

Smart, innovativ, enkel og intuitiv teknologi lar deg utføre dagligdagse aktiviteter uten behov for manuelle justeringer. Sentinel gjør nemlig jobben for deg.

Vertikale luftcelleputer kan settes opp direkte fra Sentinel-enheten eller ved hjelp av en valgfri app, slik at du slipper å bruke en håndpumpe. Sentinel vil automatisk oppdage når brukeren sitter på puten og opprettholde det klinisk innstilte luftnivået.

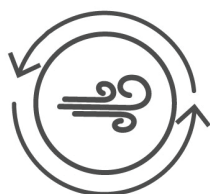

Luftstyringssystem

Når det kliniske trykknivået er satt, overvåker Sentinel kontinuerlig puten med sitt luftstyringssystem og justerer puten automatisk etter behov.



Varsler

Sentinel overvåker og justerer kontinuerlig den vertikale luftcelleputen gjennom hele dagen, og vil varsle deg om eventuelle problemer som oppdages.



Lett og kompakt

Sentinel's lette vekt tilsvarer en mobiltelefonvekt, og er kompakt nok til å passe enkelt inn i frontlommen på Star puter.




Valgfri app

Sentinel leveres med en valgfri app der du kan velge innstillinger som fungerer for deg og følge med på målinger.

Sentinel + StabilAir – Den perfekte kombinasjonen

Sammen skaper de en stabil pute som automatisk tilpasser seg endringer i miljøet eller høyden.

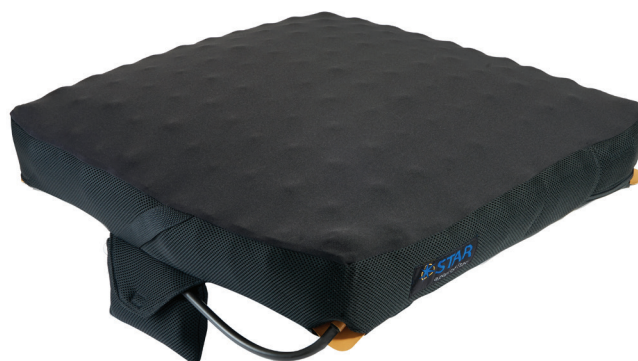




Produktnavn	Art. nr	Dimensjoner LxBxD	Vekt
Sentinel, powered by Kalogon - EU unit	KA0501-ST-EU	114x55x37 mm	0,2 kg
Teknisk			
Batteri: Lithium Ion 1,000 mAh	Brukervektgrense: Se putens brukermanual.		
Ladetid: 3 - 4 hours	Kompatibel med: enkammer luftputer, f.eks. Star Standard Air og StabilAir.		
Batteri levetid: 24 - 56 sammenhengende			
Vannbestandighet: IPX4			
App tilkobling: via Bluetooth			
Teknisk lekkasjedeteksjon: Sentinel kan oppdage de fleste perforeringsskader på puten opptil 3 mm i størrelse. Imidlertid kan Sentinel ikke varsle brukeren om mulig lekkasje der mikroperforeringer lekker svært sakte på grunn av neoprenets egenskap til å skape en tetning, men vil kompensere for eventuell lufttap.			



Etac er verdensledende innen utvikling av innovative hjelpemidler og utstyr forflytning av pasienter. Siden 1973 har vi arbeidet for å forbedre livskvaliteten til enkeltpersoner, familiemedlemmer og pleiere.

For produktenes tiltenkte formål og oppdatert informasjon, gå til etac.no

Etac

-  815 69 469
-  hovedkontor.norge@etac.com
-  www.etac.no

 **etac**®
Creating Possibilities