



Serie 10330 fra hmi-basen.dk

Wombat

Funktionel arbejdsstol til børn


 etac®

R82 Wombat

Wombat er en funktionel arbejdsstol til børn, der vil være med overalt. Wombat fås i 2 udgaver, Wombat basic og Wombat upgrade. Understellet på Wombat basic har et smart og enkelt design. Stellet er bygget op omkring et centerrør, hvor højdejusteringen foregår ved hjælp af en gasfjeder. Er der brug for et større indstillingsområde højdemæssigt og / eller lettere betjenbar højderegulering, skal Wombat upgrade vælges.

Understellet på Wombat upgrade har samme funktioner som det kendte High-low stel, dog er udformningen tilpasset kravene til en funktionel arbejdsstol. Højdejusteringen foregår ved hjælp af en fodbetjent gasfjeder eller med el.

På både Wombat basic og Wombat upgrade er sæde og ryg udstyret med et væld af indstillingsmuligheder, som gør det let at tilpasse Wombat til barnets behov. Barnet har stor bevægelsesfrihed samtidig med, at den nødvendige støtte sikrer en god korrekt siddestilling. Ryggen indstilles manuelt i dybde, højde og vinkel. Sædevinklen indstilles manuelt og trinløst ved hjælp af en gasfjeder.

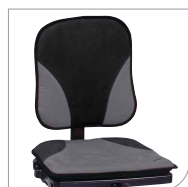

Betræk Grå / sort - 18
Standard




Betræk Blå / rød - 15
Bestillingsvare



Betræk Rød / grøn - 14
Bestillingsvare (ej str. 3)

Teknisk information

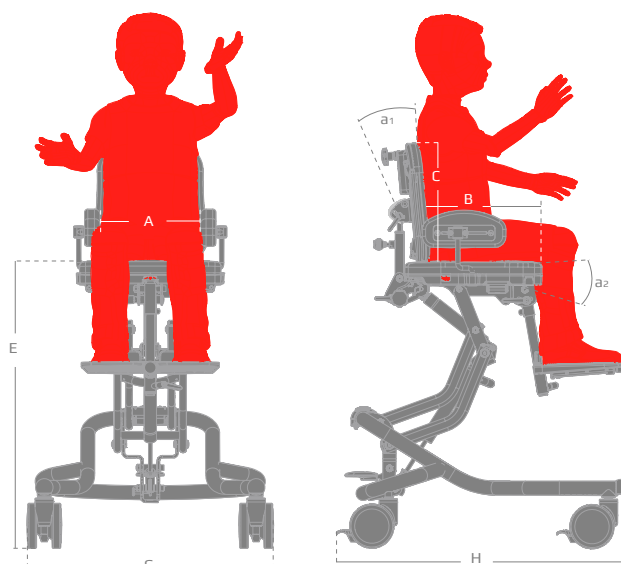

	Wombat Basic Str. 1	Wombat Basic Str. 2	Wombat Upgrade Str. 1	Wombat Upgrade Str. 2	Wombat Upgrade Str. 3
Sædebredde (A)	21 - 30 cm	28 - 37 cm	21 - 30 cm	28 - 37 cm	35 - 44 cm
Sædedybde (B)	16 - 29 cm	23 - 36 cm	16 - 29 cm	23 - 36 cm	30 - 48 cm
Ryghøjde (C)	28 - 34 cm	31 - 38 cm	28 - 34 cm	31 - 38 cm	39 - 50 cm
Sædehøjde (E)	46 - 66 cm	46 - 66 cm	34 - 69 cm	34 - 69 cm	38 - 68 cm
Stel bredde (G)	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	61 cm
Stel længde (H)	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	72 cm
Vinkling af ryg (vandring) (a1)	40°	40°	40°	40°	43°
Vinkling af sæde (a2)	-20° til 15°	-20° til 15°	-20° til 15°	-20° til 15°	-22° til 10°
Max. belastning	45 kg	45 kg	45 kg	45 kg	70 kg
Vægt	14,5 kg	14,5 kg	15,5 kg	15,5 kg	22 kg



Bestilling

Beskrivelse

HMI-nr. Varenr.

Basic m/gasfjeder, str. 1	29763	3195222-18CB
Basic m/gasfjeder, str. 2	39559	3195244-18CB
Upgrade m/gasfjeder, str. 1	39562	3195322-18CB
Upgrade m/gasfjeder, str. 2	39561	3195344-18CB
Upgrade m/gasfjeder, str. 3	29764	3195366-18CB
Upgrade m/el, str. 1	29765	3195422-18CB
Upgrade m/el, str. 2	39563	3195444-18CB
Upgrade m/el, str. 3	39564	3195466-18CB

Wombat som standard

Stel	Pulverlakeret stål, højdeindstilleligt
Ryg	Højdeindstillelig og vinkeljusterbar
Sæde	ABS plast, vinkeljusterbart
Hwynder	Flammesikret koldskum
Betræk	Flammesikret komfort, vask ved 40°
Fodplade	Aftagelig, højde- og vinkeljusterbar, opklappelig
Hjul	100 mm hjul, letkørende
Bremser	Wombat basic: Centralbremse Wombat upgrade: Centralbremse
Farve*	Stelfarven er sort perlemor og betrækket grå/sort

* Wombat leveres med komfort betræk i blå/rød, rød/grøn eller grå/sort, alt efter størrelse. For at sikre kort leveringstid, har vi valgt komfort betræk i grå/sort som lagervare. Ønskes en af de øvrige farver, må der påregnes længere leveringstid.

Tilbehør og reservedele



Hovedstøtter

Vi henviser til brochuren
„Tryk og sikker“



Svingbare knæstøtter, sæt

Str. 1 og 2	3195116
Str. 3	3195117



Løftehåndtag, sæt

Opklappelige	3195145
Faste	3195146



Armlæn str. 1 og 2, sæt

H x B x L cm	
6 - 18 x 8 x 26	3195112
Armlæn forlænget i højden	
12 - 21 x 8 x 29	3195113




Skubbebøjle specialtilpasset til Wombat 2

Str. 2	3189976-SPEC
--------	--------------




Armlæn str. 3, sæt

H x B x L cm	
6 - 18 x 8 x 26	3195114
6 - 18 x 8 x 29	3195115

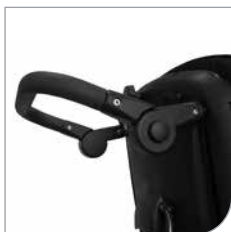

Skubbebøjle til Wombat 3

Str. 2	3195147
--------	---------

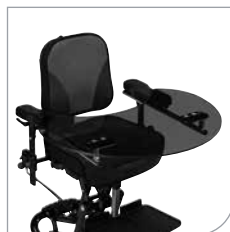

Bord, tonet plast

	B x D cm	
Str. 1 og 2	60 x 34	3195125
Str. 3	60 x 46	3195126



Svingbare sidestøtter

Vi henviser til brochuren
„Tryk og sikker“



Bord med kant, grå plast

One size	3189220-01
Ydre mål: B 49 x D 38 cm	
Udskæring: B 25 x D 12 cm	



Faste sidestøtter, sæt

	H x D cm	
Str. 1 og 2	15 x 11	3195120



Bord med kant, klar plast

One size	3189230-01
Ydre mål: B 49 x D 38 cm	
Udskæring: B 25 x D 12 cm	

Tilbehør og reservedele



Mellemstykke til Wombat str. 3

	H x B cm	
Str. 3	6 x 27	3195140-18



Ryghynde med betræk, lændepude og kiler

	H x B x D cm	
Str. 1	28 x 26 x 5	3195031-218
Str. 2	32 x 30 x 5	3195032-218
Str. 3	36 x 36 x 5	3195033-218



Abduktionsklods

	H x B x D cm	
Str. 1	9 x 9 x 9	3195130-1
Str. 2	9 x 9 x 12	3195130-2
Str. 3	9 x 9 x 15	3195130-3
Str. 4	9 x 9 x 18	3195130-4



Ekstra betræk til ryghynde

Str. 1	3195611-218
Str. 2	3195612-218
Str. 3	3195613-218




Hoftestøtter, sæt

	H x B cm	
Wombat str. 1 og 2	8 x 19	3195110
Wombat str. 2 og 3	10 x 25	3195111



Sædehynde med betræk og kiler

	H x B x D cm	
Str. 1	5 x 32 x 33	3195021-218
Str. 2	5 x 40 x 40	3195022-218
Str. 3	5 x 42 x 48	3195023-218

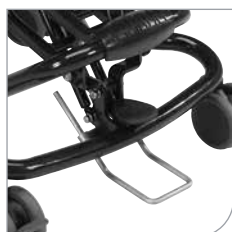

Tipsikring

Str. 3	3195953
--------	---------



Ekstra betræk til sædehynde

Str. 1	3195621-218
Str. 2	3195622-218
Str. 3	3195623-218



Veste

Vi henviser til brochuren „Tryk og sikker“



Kiler til sæde og ryg, sæt

Str. 1	3195530-1
Str. 2	3195530-2
Str. 3	3195530-3



Seler

Vi henviser til brochuren „Tryk og sikker“

Tilbehør og reservedele



Fodplade uden stang

	B x D cm	
Str. 1	31 x 20	3195145-1
Str. 2	36 x 24	3195145-2
Str. 3	41 x 25	3195145-3



Stang til fodplade

Str. 1 og 2	L 20 cm	3182927
Str. 3	L 28 cm	3182787



El-kit

One size	3195550
----------	---------



Centralbremse kit

Basic	3195949
Upgrade	3195950



Wombat basic med gasfjeder



Wombat upgrade med gasfjeder



Wombat upgrade med el



Fra høj til lav



R82®

nothing compares to a smile!



Wombat - Version 2 - 2015 - Forbehold for trykfejl og evt. ændringer

Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens, Danmark
Tel 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57
info@etac.dk www.etac.dk

etac®
Skaber muligheder