



Etac My-Loo

Toalettsitsförhöjare
med fast montering

 **etac**[®]

Etac My-Loo

Med en unik, patenterad armstödslösning, välformad sits och snabb, enkel montering, erbjuder nya My-Loo tryggt stöd, hög komfort och enkel hantering. Toaletsitsförhöjaren passar de flesta toaletter och sitter stadigt på plats.

Utvecklad för självständighet och värdighet

My-Loo ger brukare med nedsatt rörlighet eller balansproblem, möjlighet att tryggt och självständigt klara toalettbesöken. Med förhöjd sits och stabila armstöd blir det enklare att sätta sig ner och resa sig upp från toaletten. En större sitsöppning och generosa intimurtag underlättar åtkomlighet vid personlig hygien.

Finns i fem olika varianter

Etac My-Loo med fast montering finns i olika utföranden, med eller utan armstöd och i sitthöjder på 2, 6 eller 10 cm. Vid behov kan en modell utan armstöd senare kompletteras med armstöd.



Etac My-Loo toaletsitsförhöjare med fast montering

	Art.nr
My-Loo med armstöd, 20 mm	80301510
My-Loo med armstöd, 60 mm	80301511
My-Loo med armstöd, 100 mm	80301512
My-Loo, 60 mm	80301513
My-Loo, 100 mm	80301514

Vikt

My-Loo med armstöd, 20 mm: 3,2 kg My-Loo, 60 mm: 2,2 kg
 My-Loo med armstöd, 60 mm: 3,4 kg My-Loo, 100 mm: 2,4 kg
 My-Loo med armstöd, 100 mm: 3,7 kg

Max brukarvikt

150 kg
 Tillsammans med tillbehör Stödben, 80301603: 200 kg

Material

Armstöd: Polypropen
 Sits/Lock/Porslinfäste: Polypropen
 Fästansordning: Rostfritt stål & Polypropen, TPE

Design

Myra Industriell Design AB

Tvättråd



Rengör/desinficera produkten med vanliga rengöringsmedel utan slipmedel och med ett pH-värde mellan 5 och 9 eller med 70 % desinfektionssprit. Produkten tål rengöring i kabinetttdiskdesinfektor i 85 °C i 3 minuter. Max brukarvikt: 150 kg.

Funktioner



Anpassningsbara armstöd

Med en unik, patenterad lösning kan armstöden snabbt och enkelt anpassas efter behov. Välj mellan 3 olika höjdlägen för bästa stöd. De stabila armstöden fälls enkelt upp och ner utan klämrisk för brukaren. My-Loo kan även användas med bara ett armstöd.



Enkel, bekväm montering

Med en ny innovativ lösning installeras Etac My-Loo enkelt och snabbt. Praktiska snabbmuttrar gör det möjligt att fästa toaletsitsförhöjaren ovanifrån. Sits och armstöd klickas sedan smidigt i sina fästen.



Rymlig och praktisk

Generösa urtag och en större sitsöppning ger god åtkomlighet. Toaletsitsförhöjarens utformning med fritt utrymme runt sitsen ger gott om plats oavsett kroppsform.



Stabil

My-Loo sitter stadigt på plats och har en max brukarvikt 150kg. För extra stöd och ökad vikt kapacitet kan My-Loo kompletteras med tillbehöret Stödben (max brukarvikt 200kg).



Trygghet och komfort

Med stabila, greppvänliga armstöd och välformad sits gör My-Loo toalettbesöket tryggt och bekvämt för användaren. För extra komfort finns också en mjuksits att beställa.



Enkel att rengöra

De rena, släta ytorna torkas lätt av med en mjuk trasa. Krävs separat rengöring lyfts sits och armstöd enkelt ur sina fästen och sätts lika enkelt tillbaka.



My-Loo med armstöd
2 cm



My-Loo med armstöd
6 cm



My-Loo med armstöd
10 cm




My-Loo
6 cm



My-Loo
10 cm

Mått

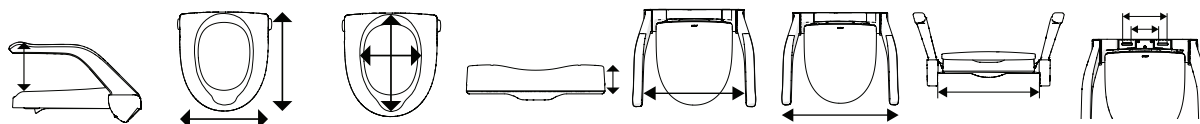

Modell	Höjd armstöd	Bredd/Längd	Inner mått	Höjd	Bredd mellan armstöd	Total bredd	Montering bredd (max toalett bredd)	Mått mellan hål
80301510	215/245/285 mm	360/400 mm	215/285 mm	20 mm	480 mm	570 mm	400 mm	c/c 123-203 mm
80301511	175/205/245 mm	360/400 mm	230/360 mm	60 mm	480 mm	570 mm	400 mm	c/c 123-203 mm
80301512	135/165/205 mm	360/400 mm	230/360 mm	100 mm	480 mm	570 mm	400 mm	c/c 123-203 mm
80301513	-	360/400 mm	230/360 mm	60 mm	-	-	400 mm	c/c 123-203 mm
80301514	-	360/400 mm	230/360 mm	100 mm	-	-	400 mm	c/c 123-203 mm

Tillbehör



Mjuksits

Art. nr 80301604
Ergonomiskt formad med skön mjukhet.
Ger god avlastning och bekvämt stöd.
Material: Polyurethane



Toppmonterad skruvsats

Art. nr 80301626
För toaletter utan genomgående fästhål.
Får endast användas tillsammans med de inkluderade stödbenen.
Passar infästningshål Ø20mm.
Material: Aluminium, Polyamid Polypropen



Stödben

Art. nr 80301603
För extra stabilitet. Ökar max brukarvikten till 200 kg. Uppfällbara.
Material: Aluminium, Polyamid, polypropen, TPE, rostfritt stål



Toalettpappershållare

Art. nr 80301601
Fästs i armstödet.
Material: Polymamid, rostfritt stål



Förvaringskorg

Art. nr 80301602
Fästs i armstödet.
Material: Polyamid, polyester/mesh, rostfritt stål



Tvärslå

Art. nr 80303034
Ett tryggt stöd att hålla sig i.
Kan användas som kryststöd.
Fästs runt armstöden. 60,5 cm
Material: aluminium, PE



Armstöd

Art. nr 80301606
Såls parvis, höger, vänster variant.
Material: Polypropen

Vi vill ge människor möjlighet att påverka sin egen tillvaro och skapa en egen vardag på sina egna villkor – oavsett fysiska förutsättningar.

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se